

2016年06月28日

ひざ周り・太もものマッサージ機能を新搭載 (EW-RA96)

エアーマッサージャー「レッグリフレ」EW-RA96/RA86を発売

足先からひざ周り・太ももまで脚全体をしぼり上げマッサージ (EW-RA96)



| | | |
|--------|------------|---------|
| 品名 | エアーマッサージャー | |
| 愛称 | レッグリフレ | |
| 品番 | EW-RA96 | EW-RA86 |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 発売日 | 9月1日 | |
| 月産台数 | 8,000台 | 4,000台 |

パナソニック株式会社は、足先からひざ周り・太ももまで脚全体をしぼり上げてマッサージができるエアーマッサージャー「レッグリフレ」EW-RA96を9月1日より発売します。

本製品は、従来品 (EW-NA84) で要望の高かった“太ももまで揉みほぐしたい”というニーズと、ひざ裏をマッサージすることの重要性に着目し「ひざ巻き」と「太もも巻き」の2つの巻き方で脚全体に対応したアタッチメントを新開発しました。

「ひざ巻き」はひざ裏を中心にのみほぐすことで、脚全体のコリをほぐすことができ「太もも巻き」は足先から太ももまで脚全体の重だるさをすっきりさせることができます。また、複数のエアーバッグの「タイミング」ため「動き」をリアルタイムに制御する「シックスバルブシステム」を新開発し、人の手によるマッサージ感の追求と人の手では再現が難しい約40種類もの多彩なマッサージパターンを実現、幅広い脚の悩みに対応した8つのマッサージコースを搭載しました(※1)。更に毎日使っても清潔に保てる抗菌(※2)仕様に対応しました。

また、足先からふくらはぎまでしぼり上げてマッサージできるEW-RA86も同時に発売します。

当社は本製品により、働く女性をターゲットに1日の脚の疲れやコリを自宅で手軽にケアしたいといったニーズに応えます。

<特長>

1. 足先からひざ周り、太ももまで脚全体をしぼり上げマッサージ (EW-RA96)
2. 温感ヒーター(※3)と新開発 足裏用パッドで足先を温めながら、足裏をグイグイマッサージ
3. プロに学んだ8つのマッサージコースを搭載 (EW-RA96)

※1: EW-RA96

※2: 肌と接触する内側生地 試験機関: (一財) ポーケン品質評価機構 試験方法: 菌液吸収法 (JIS L 1902) 抗菌方法: 無機抗菌成分 (銀系) を生地 に浸漬 試験結果: 清菌活性値 2.5 以上 (抗菌防臭効果は 2.0 以上)

※3:温感(ヒーター)部は布地の足先部分のみを温めます。ヒーターは足先に取り付けていますので、脚全体が温まるものではありません。

【お問い合わせ先】

お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-878-365 (受付9時から20時)

【特長】

1. 足先からひざ周り、太ももまで脚全体をしばり上げマッサージ(EW-RA96)

ひざ周り・太もものマッサージ機能を新搭載。ひざ裏をほぐす「ひざ巻きスタイル」太ももをもみほぐす「太もも巻きスタイル」の2つのスタイルで重だるい脚全体(12箇所)を心地よくほぐします。ひざ裏や太もも裏の筋肉にフィットする丸い形状の「ポイントボール」により、人の手のひらでグイッと押されるような心地よさを再現しました。ひざ裏は太ももとふくらはぎの筋肉のつけ根で、ひざ裏をほぐすことで脚全体のコリをほぐすことができます。また太ももの筋肉(大腿四頭筋)は、全身の中で最も強く大きい筋肉のため、太ももをもみほぐすことで血行が促進され、重だるさをすっきりさせることができます。



2. 温感ヒーター(※3)と新開発 足裏用パッドで足先を温めながら、足裏をグイグイマッサージ

足先にフィットする「曲面ヒーター」で足先を温めます。温度は高温(約40℃)低温(約37℃)の2段階の設定が可能です。新開発の足裏用パッドはパッドの向きを変えられるので、土踏まずやお好みの箇所をグイグイもみほぐすことができます。




※4:土踏まずに使用する場合

3. プロに学んだ8つのマッサージコースを搭載(EW-RA96)

本製品は、プロに学んだ8つのマッサージコースを採用し、ヒールによる疲れや重だるさ、運動後の筋肉痛など、幅広い脚の悩みに対応しています。

EW-RA96 に搭載のマッサージコース

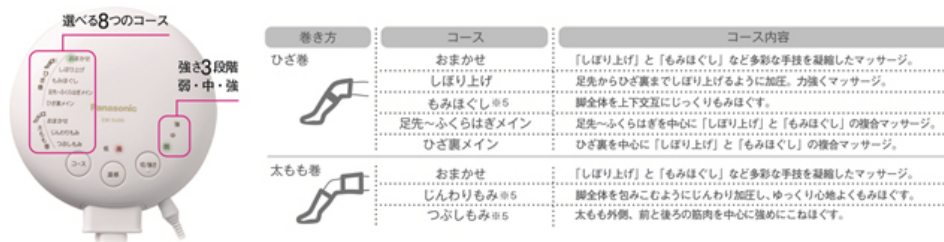

もみの強さは3段階から選択できます。

※5:もみ感覚の圧迫機能です。

【その他の特長】

- シックスバルブシステム 新開発6つの電磁弁により部位毎にある複数のエアバッグの動きをリアルタイムに制御し、約40種類もの多彩なマッサージ手技を実現。
- ヒューマンハンドエアバッグ 狙いの部位を人の手でマッサージされているような心地よさを再現するエアバッグを開発。
- 抗菌(※2)対応 毎日使っても、清潔に保てる抗菌(※2)仕様

【需要動向】

(当社調べ)

| 年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度見通し | 2017年度予測 |
|---------------|--------|--------|-----------|----------|
| エアーマッサージャー総需要 | 約108万台 | 約110万台 | 約120万台 | 約132万台 |

【仕様一覧】

| 品番 | EW-RA96 | EW-RA86 |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 色 | -P(ピンク)-K(ブラック) | |
| 使用電源 | 電源AC100V 50-60Hz | |
| 定格消費電力 | 24W (電熱装置の定格消費電力5W) | 21W (電熱装置の定格消費電力5W) |
| 医療機器認証番号 | 228AHBZX00014000 | 228AHBZX00013000 |
| 温感(ヒーター)部 表面温度(室温20℃) | アタッチメント内側布地表面温度 低:約37℃ 高:約40℃ | |
| エア圧力 | 弱:約36kPa 中:約44kPa 強:約54kPa | 弱:約35kPa 中:約42kPa 強:約50kPa |
| 施術箇所 | 12箇所 足先、足裏、かかと、足首、すね、 ふくらはぎ、ふくらはぎ上、ひざ裏、 ひざ上、太もも前、太もも後ろ、 太もも内・外 | 6箇所 足先、足裏、かかと、足首、すね、 ふくらはぎ |

| | | |
|----------|--|--|
| 自動コース | 8コース (ひざ巻き:おまかせ、しぼり上げ、 もみほぐし、足先～ふくらはぎメイン、 ひざ裏メイン/太もも巻き:おまかせ、 じんわりもみ、つぶしもみ) | 6コース おまかせ、しぼり上げ、もみほぐし、 ソフトもみ、ふくらはぎメイン、足メイン |
| タイマー | 約10分 | |
| 本体寸法 | (操作器)直径約14.5×高さ約6cm (足用アタッチメント)幅約78× 奥行約30×高さ約81cm | (操作器)直径約14.5×高さ約5cm (足用アタッチメント)幅約57× 奥行約30×高さ約39cm |
| 質量 | 約2390g (操作器+アタッチメント左右) | 約1600g (操作器+アタッチメント左右) |
| 使用可能なサイズ | 足サイズ:約20～28cm ふくらはぎ周囲:約27～48cm 太もも周囲:約45～64cm | 足サイズ:約20～28cm ふくらはぎ周囲:約27～48cm |
| 付属品 | 足裏用パッド、すね用パッド | |
| 生産国 | 中華人民共和国 | |

| | |
|------------------------|---|
| 家庭用 エアマッサージ器の 効果 | 【あんま、マッサージの代用】 疲労の回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる |
|------------------------|---|

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。