

2017年7月24日

仕事時間がコリ^(※1)の治療時間に。業界唯一^(※2)家庭用高周波治療器
高周波治療器 コリコラン EW-RA510／RA500を発売
 高周波で血管拡張・血行促進



EW-RA510



EW-RA500

高周波治療器 コリコラン (2017年7月 パナソニック)

品名	高周波治療器 コリコラン	
愛称	CoriCoran	
品番	EW-RA510	EW-RA500
内容	4個入り	2個入り
メーカー希望小売価格	オープン価格	
発売日	10月21日	
月産台数	5,000台	3,000台

パナソニック株式会社は、肩や腰にあてることで血管を拡張し、コリを治療する高周波治療器 コリコラン EW-RA510／RA500を10月21日より発売します。

肩コリや腰痛に悩む方は年々増加傾向にあります。これは長時間のパソコン作業を伴うデスクワークや日々のスマートフォンの操作等が原因と考えられます。このような環境の中、時間や場所を選ばず手軽にコリを治療できる機器が求められています。

本製品は、コリの改善を目的とした医療機器として認証された業界唯一^(※2)の家庭用高周波治療器です。肩や腰の患部に装着するだけで、高周波パルスが血管を広げて血行を促進、肩や腰のコリを治療します。本体サイズは直径約3cm・重さ約6gの小型で軽量、充電式でコード類の煩わしさがなく、更に刺激感がないのでコリの原因となる仕事や家事の時間での「ながらコリ^(※1)治療」が可能になりました。

当社は本製品により、仕事や家事をしながら肩や腰のコリを治療したいというニーズにお応えします。

<特長>

1. 高周波で血管拡張、血行促進。肩・腰コリを改善
2. 小型・軽量かつコードレスで長時間のコリ(※1)治療が可能
3. お好みに応じて選べる2wayの装着スタイル

※1:肩・腰の部位

※2:家庭用医療機器として 2017年7月24日時点 当社調べ

【お問い合わせ先】

理美容・健康商品ご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-697(受付9時から20時)

【特長】

1. 高周波で血管拡張、血行促進。肩・腰コリを改善

肩や腰の患部に装着するだけで、約9MHz(1秒間に約900万回)の高周波が、身体組織まで深く浸透、血管拡張及び血行促進作用を促し、肩・腰コリを治療します。



高周波チェック方法

高周波が出ているか高周波チェッカー、または動作確認ランプで確認できます。

■高周波チェッカー

コリコラン本体をかざすとブザー音が鳴り、チェッカーランプが点滅、高周波が出ているか確認できます(約4cmの距離で反応)。




■高周波チェッカー音 ON/OFFスイッチ

オフィスや自宅での使用時、また移動中等ブザーが鳴ってほしくない場合はOFFにできます。



■動作確認ランプ

動作確認
ランプ

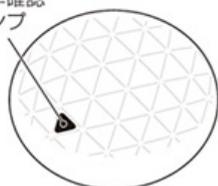

▼ 緑色点灯	コリコラン本体が充電されています。
▼ 緑色点滅	高周波が出ています。
▼ 赤色点滅	高周波が出ています。充電残量が少なくなっています。(残量目安時間 約30分)
▼ 消灯	高周波は出ていません。充電してください。

2. 小型・軽量かつコードレスで長時間のコリ(※1)治療が可能

本体サイズは直径約3cm・重さ約6gと小型・軽量、充電式(3時間充電で約24時間(※3)連続使用)でコード類の煩わしさがなく長時間の装着に配慮しました。更に本製品で採用している高周波パルスは低周波治療器と異なり刺激感がないのでコリの原因となる仕事や家事の時間での「ながらコリ(※1)治療」が可能になりました。

※3: 常温20℃の場合。9時間充電すると約48時間の連続使用が可能。



3. お好みに応じて選べる2wayの装着スタイル

付属の装着テープで肌に直接貼り付けたり、シリコン製の装着リングを用いてストラップや肌着等につけて使用することもできます。装着テープは肌にやさしい医療用テープ(JIST0993-1準拠)を採用しました。



【その他の特長】

- ACアダプターと単4乾電池、2つの充電方法に対応。単4乾電池でコリコラン本体を充電することができ出張や旅行などでACアダプターを持ち運ばなくても充電が可能です。
- 水の侵入を保護する防水IPX7対応
- 手軽に持ち運びできるスエード調の収納ポーチを同梱

【需要動向】

年度	2015年度	2016年度	2017年度見通し
健康小物 総需要	約145万台	約153万台	約157万台

【より快適にお使い頂くために】

品名	品番	メーカー希望小売価格(税抜)	発売日
装着テープ(32枚入り)	EW-9R01	オープン価格	10月21日
コリコラン本体(※4) (コリコラン本体1個、装着リング1個)	EW-9R50R	オープン価格	

※4: 本機をお使い頂くにはEW-RA510・EW-RA500が必要です。

【仕様一覧】

品番		EW-RA510	EW-RA500
色		-K(ブラック)	
医療機器認証番号		229AHBZX00023000	
電氣的 定格	コリコラン 本体	定格電圧 DC2.3V 水の侵入に対する保護 IPX7	
	充電器 ACアダプターの場合	ACアダプター:AC100V 50-60Hz	
		定格消費電力 0.9W	定格消費電力 0.6W
	充電器 乾電池の場合	DC6.0V 単4アルカリ乾電池 4本	
寸法	コリコラン 本体	4個入り	2個入り
		外形φ約33×高さ約8.5mm	
	充電器	幅約150×奥行き約105×高さ約38.5mm	幅約117×奥行き約105×高さ約38.5mm
質量	コリコラン本体	約6g(1個につき)	
	充電器	約170g(乾電池含まず)	約140g(乾電池含まず)
生産国		中華人民共和国	

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。