

2018年7月3日

コンパクト・コードレス仕様。便利な電池&ACアダプターの2Way電源

## エアーマッサージャー「コードレス レッグリフレ」EW-RA38を発売

好きな時に、好きな所で。もっと自由に脚リフレッシュ。



-P (ピンク)



-K (ブラック)

品名	エアーマッサージャー
愛称	コードレス レッグリフレ
品番	EW-RA38
メーカー希望小売価格	オープン価格
発売日	9月1日
月産台数	8,000台

パナソニック株式会社は、電池対応で場所を選ばずマッサージができるコードレスタイプのエアーマッサージャー「コードレス レッグリフレ」EW-RA38を9月1日より発売します。

当社レッグリフレは、多忙なワーキングウーマンを中心に仕事や家事の合間に手軽に使える「ながらマッサージ」の提案が支持され発売以来（EW-NA31 2010年発売）累計販売台数70万台超と好評です。

本製品は、家ではもちろんオフィスや長時間の移動中、スポーツの後などでも手軽にマッサージがしたいというニーズに応え、単3形電池（充電電池推奨※1）対応に加え、従来の操作器やエアークッションを一体化したコンパクトなコードレス対応モデルです。煩わしいコードを気にせず、電源がない場所でも使用できます。またACアダプターも同梱しているのでシーンに合わせた使い分けが可能です。電池対応仕様でありながら、力強さは従来※2と変わらず、進化したエアークッションが疲れた脚を力強くもみほぐし血行を促進します。新開発サイレンサー搭載エアークッションで、動作音を気にせず気軽にお使いいただけます。

また忙しい時間の合間に手軽にリフレッシュできる「クイック5分」コースを搭載し“短時間でスッキリしたい”を叶えます。

当社は、仕事や移動中、スポーツの後、お休み前など様々なシーンで疲れを感じたときに手軽にマッサージができる本製品で、忙しくても疲れやコリを溜めない習慣“ながらリフレッシュ”を提案してまいります。

### <特長>

1. 足首からふくらはぎまでもみほぐして血行促進
2. コードレスでかんたん・手軽ながらリフレッシュ
3. プロに学んだ3つのマッサージコース

※1 充電式ニッケル水素電池（パナソニック製エネループスタンダードモデルまたは充電式エボルタスタンダードモデル）推奨

※2 EW-RA98、EW-RA88と同等

## 【お問い合わせ先】

理美容・健康商品ご相談窓口  
フリーダイヤル 0120-878-697 (受付9時から18時)

## 【特長】

### 1. 足首からふくらはぎまでもみほぐして血行促進

本製品は、足裏、かかと、足首、すね、ふくらはぎの全5か所をもみほぐしマッサージします。人の手によるマッサージを再現する「ヒューマンハンドエアバッグ」が進化し、新たにふくらはぎの後ろ側にエアバッグを追加しました。疲れを感じやすいふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)を中心にから外側までパワフルにもみほぐします。また足首のエアバッグを大きくしたことで、足首を包み込みながらぎゅっとつかみ、力強く加圧、マッサージするので足首からふくらはぎまで、しっかりもみほぐして血行を促進します。



### 2. コードレスでかんたん・手軽 ながらリフレッシュ


本製品は、単3形電池(充電電池推奨※1)対応で、電源がない場所でも使用でき、従来の操作器やエアーストを一体化したコードレスタイプです。

カバンにすっぽり入るコンパクトサイズでかさばらず、手軽に持ち運べます。新開発「サイレンサー搭載エアポンプ」で、動作音を抑え周囲に気せずマッサージが可能です。従来品では面ファスナーによる着脱が煩わしいという声があり、新製品では面ファスナーに加え、さっと取り外せるように線ファスナーも採用しました。動作音や着脱の手間を気せず様々なシーンで「ながら」でマッサージが可能です。

#### 【単3形電池(別売)・AC電源の2WAY】



#### 【サイレンサー搭載エアポンプ】

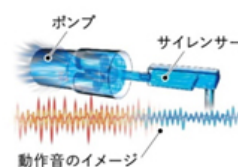

### 3. プロに学んだ3つのマッサージコース

本製品は、より短時間でスッキリしたい、という要望に応え、5分で手軽にリフレッシュできる「クイック5分」コースを新たに搭載しました。あわせて足首からふくらはぎ全体をスッキリさせる「もみほぐし」※3コースと、立ち仕事で疲れた足を重点的にほぐす「足うら」コースを搭載しました。プロに学んだ手技でヒールによる疲れや重だるさ、運動後の筋肉痛など、脚の悩みに合わせてマッサージができます。



ふくらはぎ巻きで「クイック5分」、「もみほぐし」コース



足裏巻きに巻き変え「足うら」コース

もみの強さは3段階から選択できます。

※3:もみ感覚の圧迫機能です。

## 【その他の特長】

### ●抗菌※4対応 毎日使っても、清潔に保てる抗菌(※4)仕様

※4 肌と接触する内側生地 ●試験機関: (一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法: 菌液吸収法 (JIS L 1902) ●抗菌方法: 無機抗菌成分 (銀系) を生地に浸漬 ●試験結果: 抗菌活性値2.5以上 (抗菌効果は2.0以上)

## 【需要動向】

(当社調べ)

年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度予測
健康小物 総需要	約145万台	約153万台	約128万台	約140万台

## 【仕様一覧】

品番	EW-RA38
色	-P(ピンク)-K(ブラック)
使用電源	ACアダプター: 電源AC100V 50-60Hz 単3形電池(別売): 各2本 DC2.4-3.0V(計4本使用)
定格消費電力 (ACアダプター使用時)	9W
類別	機械器具(77)パイプレーター
一般的名称	家庭用エアマッサー器
医療機器認証番号	230AHBZX00009000
エア圧力	弱: 約24kPa 中: 約40kPa 強: 約51kPa (コースや部位によって若干の違いがあります)

施術箇所		5箇所
自動コース		3コース
タイマー		クイック5分:約5分 もみほぐし、足うら:約10分
寸法	本体(右用)	約幅575×奥行45×高さ370mm
	アタッチメント(左用)	
質量		約1300g(ACアダプター、すね用パッドは除く)
対応サイズ		ふくらはぎ周囲:約27~48cm 足サイズ:約20~28cm
付属品		すね用パッド
生産国		中華人民共和国

家庭用 エアマッサージ器の 使用目的又は効果	【あんま、マッサージの代用】 ●疲労の回復 ●血行の促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる
------------------------------	---

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。