

2018年10月3日

つかみやすくコンパクト
**利用者の自立を支援する
 据え置き型「すっきり手すり クリンディ」を発売**
 狭いスペースでも設置可能



品名	「すっきり手すり クリンディ」
品番	PN-L80501
本体サイズ・重量	幅78×奥行46×高さ70～80 cm(2.5 cmピッチ5段階調整可能)・約18 kg
最大使用者体重	100 kg
希望小売価格(税抜)	58,000円
発売日	2018年10月15日
販売目標	6,000台/年(2018年度)

パナソニック エイジフリー株式会社は、つかみやすさとコンパクトな設計にこだわった据え置き型の「すっきり手すり クリンディ」を2018年10月15日に発売します。本製品は利用者が要介護度に応じて介護ショップからレンタルできる、介護保険制度の対象品(※1)です。

要介護人口の増加に伴う需要の高まりにより、介護保険を利用した手すりの貸与件数(※2)は近年二桁増で伸長しています。当社ではこれまで工事なしで設置ができる据え置き型の手すりを、要介護度に合わせて選べる幅広い品ぞろえで展開してきました。今回新たに、初めて手すりが必要になった利用者の需要が多い、ベッドからの起き上がりや、立ち上がりなどをサポートする新製品を加えることで、より多くの利用者の自立支援や介護負担軽減に貢献します。

今回発売するクリンディは、手すり部全体がつかみやすい「すっきりバー」を採用しました。つかみにくい接手(つぎて)部分がなく、握りやすい径35 mm(※3)のため、安定した起き上がり、立ち上がりがしやすい設計です。また設置面積が小さく、手すりの固定位置を2通りから選択できる土台「すっきりベース」により、狭いスペースにも設置できます。さらに、組み立てや高さ調整が簡単で、コンパクトなため持ち運びもやすく、設置作業者の負担も軽減することができます。

本製品は国際福祉機器展H.C.R.2018(会期:2018年10月10日(水)～12(金)、会場:東京ビッグサイト)、当社ブースにて展示します。

当社は、今後も、利用者が安心して使うことができ、また介助者の負担を軽減できるような製品の提供を通して、健やかで心豊かな暮らしの実現に貢献していきます。

※1:地域によって対象品に認定される時期が異なる場合があります

※2:厚生労働省調べ「介護給付費等実態調査」より算出

※3:当社調べ。太さの異なる手すりをつかみ「ちょうどよい」と答えた人数が35.4 mmの際に最多

<特長>

1. 接手(つぎて)がなく、手すり部全体がつかみやすい「すっきりバー」
2. 設置面積が小さく、置き場所が広がる「すっきりベース」
3. コンパクトで組み立てや高さ調整が簡単で、設置作業者の負担も軽減

【お問い合わせ先】

パナソニック エイジフリー株式会社 ケアプロダクツ事業部
0120-365-887(平日 9:00~12:00、13:00~17:00)

【特長】

1. 接手(つぎて)がなく、手すり部全体がつかみやすい「すっきりバー」

手すり部全体がつかみやすい「すっきりバー」を採用しました。つかみにくい接手(つぎて)部分がなく、握りやすい径35 mm(※3)のため、安定した起き上がり、立ち上がりがしやすい設計です。また、手すり部の表面を、すべりにくく柔らかい素材で覆っているため安心してつかむことができます。さらに、冷たく感じにくい素材のため、冬場の使用の不快感も軽減します。約8時間(※4) 光る蓄光シール「暗くナイス」を採用しているため、明け方などの部屋が暗い時でも手すりの位置を確認しやすくなっています。

※4:蛍光灯200ルクスで20分間照射の場合




2. 設置面積が小さく、置き場所が広がる「すっきりベース」

設置面積が小さい「すっきりベース」により、狭いスペースにも設置ができます。また、設置する場所に合わせて手すりの固定位置を、端と中央の2通りから選べます。これにより、設置場所の周囲の動線の確保や、手すりをよりつかみやすい位置へ設置しやすく、幅広い環境で使用できます。



3.コンパクトで組み立てや高さ調整が簡単で、設置作業者の負担も軽減



手すり(支柱)の固定作業を土台(ベース)の上方から行うことができ、ネジ留め箇所が4箇所のみで、簡単に短時間で設置できます。また、高さ調整を行う場合も、ネジ留め箇所が2箇所のみで簡単です。ぐらつき、たわみが小さい強度を保ちつつ、小脇に抱えやすいコンパクトなサイズのため、運搬時に壁などにぶつckerるリスクも軽減しています。

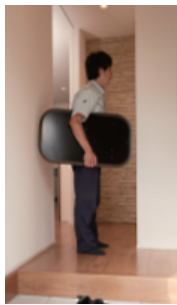

手すり(支柱)の固定作業



高さ調整の固定作業

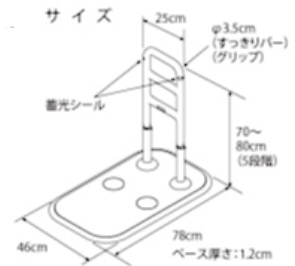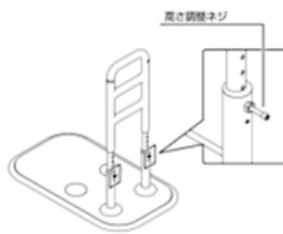

【別売 ベッド用アーム】

ベッドサイドで使用する際に取付けることで、より安定性が向上します。
ベッド下部と床面の間の寸法は45~300 mmに対応します。



品番:PN-L80511

希望小売価格:13,500円(税抜)

【ご参考】

■据え置き型手すりラインアップ(詳しくは<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/mobility/>)

パナソニックの手すりなら様々な場所でご使用できます。

新商品 すっきり手すり クリンティ

立ちあがりに特化した標準タイプ。

寝室
居間

玄関
廊下

脱衣所
トイレ

折りたたみ可能な面手すり スタンディ

面手すりだから安定した動作ができる!

寝室
居間

玄関
廊下

脱衣所
トイレ

アームサポート手すり メンディ

大きな平面だから使いやすい。

寝室
居間

玄関
廊下

脱衣所
トイレ

室内用 自在手すり ツインティ

力が入りやすい腕の形にあわせられる。

寝室
居間

玄関
廊下

脱衣所
トイレ

玄関用 自在手すり ツインティ

横向き、後ろ向きでも昇降しやすい。

寝室
居間

玄関
廊下

脱衣所
トイレ

洋式トイレ用 スライド手すり(ステンレス)

便座への移乗・排泄がしやすい。

寝室
居間

玄関
廊下

脱衣所
トイレ

【パナソニック製介護用品のレンタル・購入について】

介護用品は、品目によって介護保険制度の補助対象となるものと、ならないものがあります。また、補助対象となるものも、品目によって購入かレンタルに分かれます。パナソニック製介護用品の多くは補助対象品であり、制度を利用するために、都道府県の指定を受けた販売・貸与事業所(介護ショップ)がケアプラン(主にケアマジャーが作成)をふまえ、選定・レンタル／販売・制度利用支援を行うケースが多くなっています。

なお、介護保険上の手すりの導入補助金については、導入に伴い施工が必要なものは住宅改修としての支給対象となっており、施工を伴わない手すりの場合は福祉用具の貸与(レンタル)としての支給対象となっています。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。