

2021年3月25日

スリムな本体サイズ

アルカリイオン整水器 TK-AS48／TK-AS47を発売

シンクの空きスペースに置きやすく使いやすい



TK-AS48 (リターンタイプ)



TK-AS47 (ワンウェイタイプ)



アルカリイオン整水器 (2021年3月 パナソニック)

品名	アルカリイオン整水器	
品番	TK-AS48	TK-AS47
タイプ	リターンタイプ	ワンウェイタイプ
メーカー希望小売価格	オープン価格	
発売日	5月1日	
月産台数	1200台	

パナソニック株式会社は、狭いスペースにも設置できるコンパクトな本体サイズに、19物質を除去可能な高性能なカートリッジを搭載したアルカリイオン整水器 TK-AS48／TK-AS47 2機種を5月1日に発売します。

最近では「巣ごもり生活の定着」や「健康志向の高まり」等により、アルカリ整水器の市場が拡大しています。

本製品はシンクのそばに置き、本体の吐水パイプから生成水を出す「ワンウェイタイプ」※1に加えて、シンクから離れた場所に置いて蛇口から生成水が出る「リターンタイプ」もラインアップしました。

2機種とも本体内部の通路構造を見直し、19物質※2を除去可能な高性能カートリッジをコンパクトなサイズ内に搭載しています。

また液晶画面は、シンクから離れた場所に設置した場合でも使いやすいように、角度を28.5°にしました。この角度はキッチンのサイズから設置場所を想定し、様々な身長の人がキッチンに立った時の視線の高さを考慮し視認性が確保できる角度です。

当社は本製品で、「胃腸にいい水」を提案いたします。

<特長>

1. 狭いスペースにも設置可能なコンパクトサイズ

・幅16.8 cm×奥行9.5 cm。設置面積は同性能の当社従来品※3より約25%縮小

2. リターンタイプなら、離れた場所でも設置可能(TK-AS48のみ)

・シンクから150 cmまで対応

3. 19物質※2を除去する高性能カートリッジ搭載

※1:TK-AS47のみ

※2:JIS S 3201の試験法で規定された除去物質(16物質)と浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)で規定された除去対象物質(3物質)。

※3:当社従来品 TK-AS46比

【お問い合わせ先】

パナソニック 理美容・健康商品ご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-697(受付9時から18時)

【特長】

1. 狭いスペースにも設置可能なコンパクトサイズ

・幅16.8 cm×奥行9.5 cm。設置面積は同性能の当社従来品※3より約25%縮小

幅16.8 cm×奥行9.5 cmと設置面積を従来比※3約25%縮小。場所をとらないので水栓横のスペースにもスッキリと設置できます。また、天面のパネル角度を様々な身長の人がキッチンに立った時の目線の高さを考慮し視認しやすい28.5°にしました。



2. リターンタイプなら、シンクから離れた場所でも設置可能(TK-AS48のみ)


・シンクから150 cmまで対応

蛇口から生成水が出るリターンタイプのため、シンクから離れたところに本体を置けます(シンクから150 cmまで対応)。好きなところに置いて、シンクまわりをスッキリしたまま使えます。



3. 19物質※2を除去する高性能カートリッジ搭載

吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現しました。

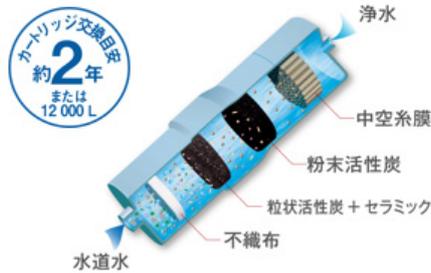

除去する物質	
遊離残留塩素 (カルキ)	1,2-DCE
濁り	ベンゼン
総トリハロメタン	ジェオスミン (カビ臭)
クロロホルム	フェノール類
ブromジクロロメタン	四塩化炭素
ジブromクロロメタン	鉄 (微粒子状)
ブromホルム	アルミニウム (中性)
テトラクロロエチレン	
トリクロロエチレン	
CAT (農薬)	
2-MIB (カビ臭)	
溶解性鉛	

アルカリイオン整水器の 使用目的または効果	胃腸症状の改善 ・胃もたれや胃の不快感をやわらげます ・胃腸の働きを助け、お通じを良好にします
--------------------------	---

■その他の特長

胃腸症状の改善が期待できるアルカリイオン水のほか、用途に合わせて5つの水が選べる

・飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけです。(弱酸性水は直接飲用しないでください。)

胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます。また、用途に合わせて5種類の水を使い分けることができます。さらに、「水質シグナル」で選んだ水の種類を色で確認することができます。



【仕様一覧】

名称		アルカリイオン整水器	
品番		TK-AS48	TK-AS47
医療用具承認番号		302AKBZX00090000	302AKBZX00089000
方式		リターンタイプ	ワンウェイタイプ
カートリッジ	ろ過できる物質数 (除去対象物質)※2	19物質※2	
	カートリッジ交換目安※4	約2年または12000 L(1日の使用量目安 15 L)	
	交換用カートリッジ(別売)	TK-HS92C1	
電解	電極(電極枚数)	3枚	
	生成水質	5種類 アルカリ:3段階 酸性:1段階 浄水	
表示	液晶表示/水信号	バックライト液晶/3色水質シグナル	
エコ	つづくモード	○(自動)	
	排水カット(浄水モード時)	○	
本体	寸法	高さ31.6×幅16.8×奥行9.5 cm	高さ33.3×幅16.8×奥行9.5 cm
	質量(満水時)	約2.3 kg(約2.8 kg)	約2.1 kg(約2.6 kg)
	電源コードの長さ	約2 m	
	ホースの長さ	給水、吐水ホース約1.5 m・ 排水ホース約1.5 m	給水ホース約0.9 m・ 排水ホース約0.6 m
水切換レバー		原水泡沫ストレート、原水泡沫シャワー付	
定格		交流100 V 1.3 A 50-60 Hz	
消費電力		約80 W(待機時:約0.4 W)	
同梱品		浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液・ 水切換レバー・固定具セット	

アルカリイオン整水器の 使用目的または効果	胃腸症状の改善 ・胃もたれや胃の不快感をやわらげます ・胃腸の働きを助け、お通じを良好にします
--------------------------	---

※4:総通水量に達していない場合でも、使用期間を過ぎると、浄水能力が低下するため、交換が必要です。また目づまりやいやなおいがあるときは交換時期の前でも交換してください。

●本リリースでは「アルカリイオン水」「弱酸性水」の用語を使用しています。これはJIS T 2004(家庭用電解水生成器)で示される「アルカリ性電解水」「酸性電解水」のことです。(アルカリイオン水そのものが効果が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください)



パナソニック アルカリイオン整水器
TK-AS48/TK-AS47 紹介動画(動画)
<https://youtu.be/SEtxWkp2BG4>

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。